


CELLIT

INTERMITTENT HYPOXIA TRAINING



INTERMITTIERENDES HYPOXIE-TRAINING

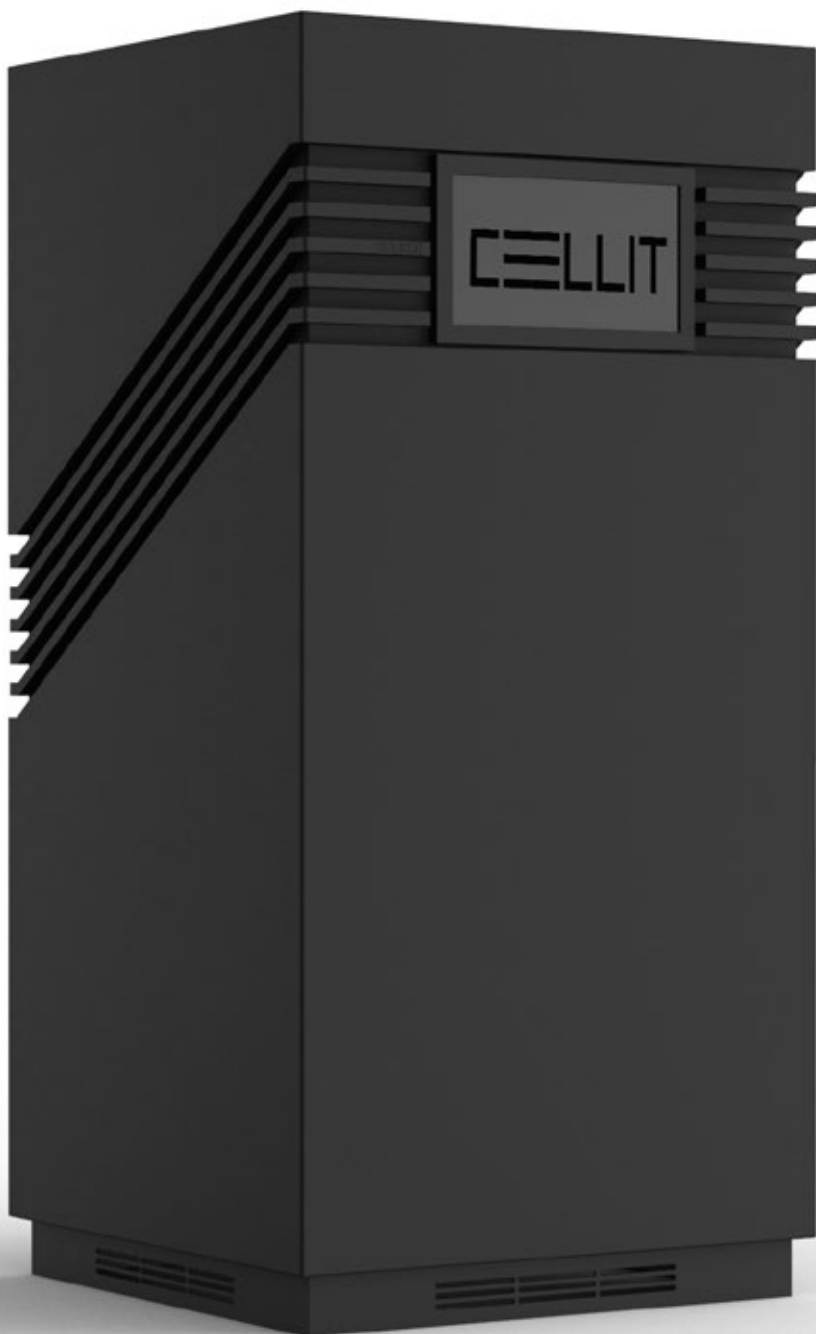

CELLIT: HYPOXIETRAINING FÜR JEDERMANN

Erleben Sie die Kraft des Intervall-Hypoxietrainings (IHT)

Intervall-Hypoxietraining ist nicht nur etwas für Spitzensportler – es ist eine revolutionäre Methode, die jedem offensteht.

Ganz gleich, ob Sie jung oder alt, fit oder auf dem Weg dorthin sind: IHT bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihre Vitalität zu steigern.

CELLIT bringt diese transformative Technologie direkt zu Ihnen nach Hause und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fitness auf sanfte, aber effektive Weise zu verbessern.

IT
FITS
YOU



HOLEN SIE SICH DAS GEBIRGE NACH HAUSE

Uncover the potential of Interval Hypoxia Training

Mit dem CELLIT-Hypoxiegerät simulieren Sie die Vorteile der Höhenluft, ohne das Haus verlassen zu müssen.

Eine Atemmaske versorgt Sie abwechselnd mit sauerstoffreduzierter Luft und normalem Sauerstoff, wodurch der Sauerstoffgehalt im Blut auf ein bestimmtes Niveau sinkt und dann wieder ansteigt.

In nur 30 bis 40 Minuten und mit 4 bis 5 Zyklen pro Sitzung erleben Sie die positiven Effekte des IHT – und das bequem von zu Hause aus.



Mühelose Fitness: Entspannung trifft auf intensives Zelltraining

Während einer CELLIT-Sitzung können Sie sich in eine entspannte Position begeben und das sanfte Training genießen.

Viele Nutzer schlafen während des Trainings sogar ein! Doch lassen Sie sich nicht täuschen: Hinter dieser entspannten Methode steckt ein intensives Training für jede Zelle Ihres Körpers. Wie beim klassischen Ausdauer- oder Muskeltraining reagiert der Körper auf den Sauerstoffmangel, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern.



IHT für alle: CELLIT revolutioniert das Hypoxietraining

Früher war IHT komplex und nur für Profis zugänglich. Mit CELLIT hat sich das geändert. Dank seines benutzerfreundlichen Designs, fairen Preises und stilvollen Ästhetik bringt CELLIT das Hypoxietraining in jedes Zuhause. Endlich können Sie die Kraft des IHT unkompliziert und flexibel nutzen – ohne teure Geräte oder komplizierte Einrichtungen.




MEHR POWER FÜR IHRE ZELLEN

Steigern Sie Ihre Zellkraft mühelos mit CELLIT – einem hochmodernen, in Deutschland entwickelten Trainingssystem.

Ausgestattet mit Funktionen wie der Überwachung von Puls und SpO₂, Sicherheitsabschaltungen und einer Betriebszeit von bis zu 90 Minuten, bietet CELLIT alles, was Sie für ein sicheres und effektives Training benötigen.

- Intervall-Hypoxie (IHT)
- Überwachung von Puls und SpO₂
- Sicherheitsabschaltung und Alarmsignal
- 6 Speicherplätze für Benutzerdaten
- 3 Standard-Trainingsprogramme
- 10 Speicherplätze für individuelle Trainingsprogramme
- Speicherung von 9 Trainingseinheiten pro Benutzer
- Optimale Geräuschisolierung
- Betriebszeit von bis zu 90 Minuten



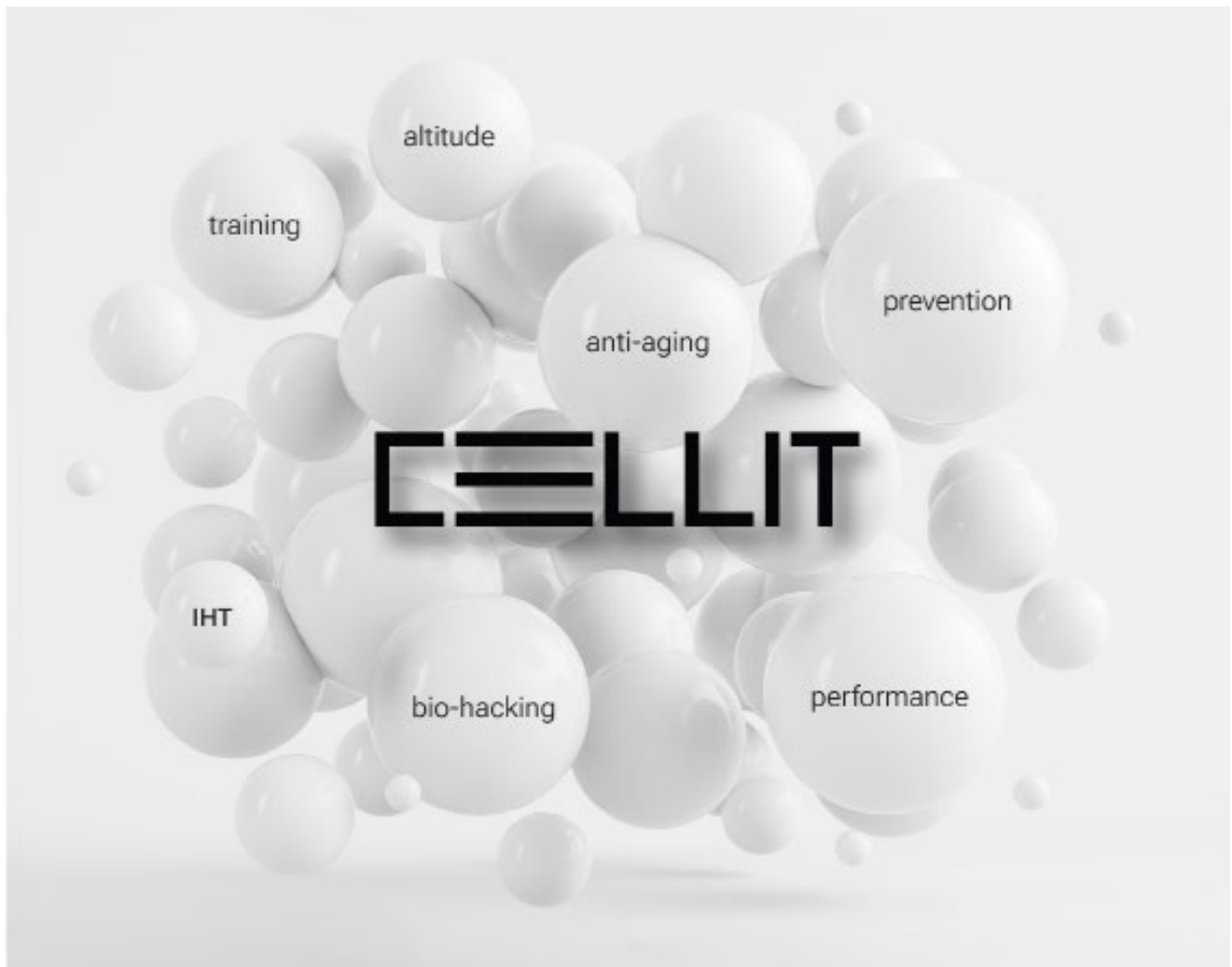

• DIE EINSTELLUNGEN •

In der Hypoxie-Phase kann der Sauerstoffanteil in der Atemgasgemisch auf 10% sinken oder im Fall des CELLIT Expert-Modells auf bis zu 9%.

Die Hypoxie-Phase kann mit einer Normoxie-Phase oder einer Hyperoxie-Phase (im Expert-Modell) abgewechselt werden.

Standardprogramme können für das Training verwendet oder individuelle Trainingspläne erstellt werden.

• DIE ANWENDUNG •

Während des Trainings werden die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2) und der Sauerstoffgehalt im Atemgas kontinuierlich überwacht.

Maximale Sicherheit wird durch definierte Sicherheitsabschaltgrenzen und akustische Alarmsignale gewährleistet, wenn die Sicherheitsgrenze unterschritten wird.


Ein Geräuschpegel von nur 45dB sorgt für maximalen Entspannungskomfort während des Hypoxie-trainings.

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL



Mit CELLIT können Sie das Gerät nicht nur funktional, sondern auch optisch nach Ihren Wünschen gestalten. Ob als auffälliges Design-Element oder unauffällig integriert – die Wahl liegt bei Ihnen.

Wählen Sie Materialien, Farben und sogar die Füße des Geräts, um es perfekt an Ihren Raum anzupassen.

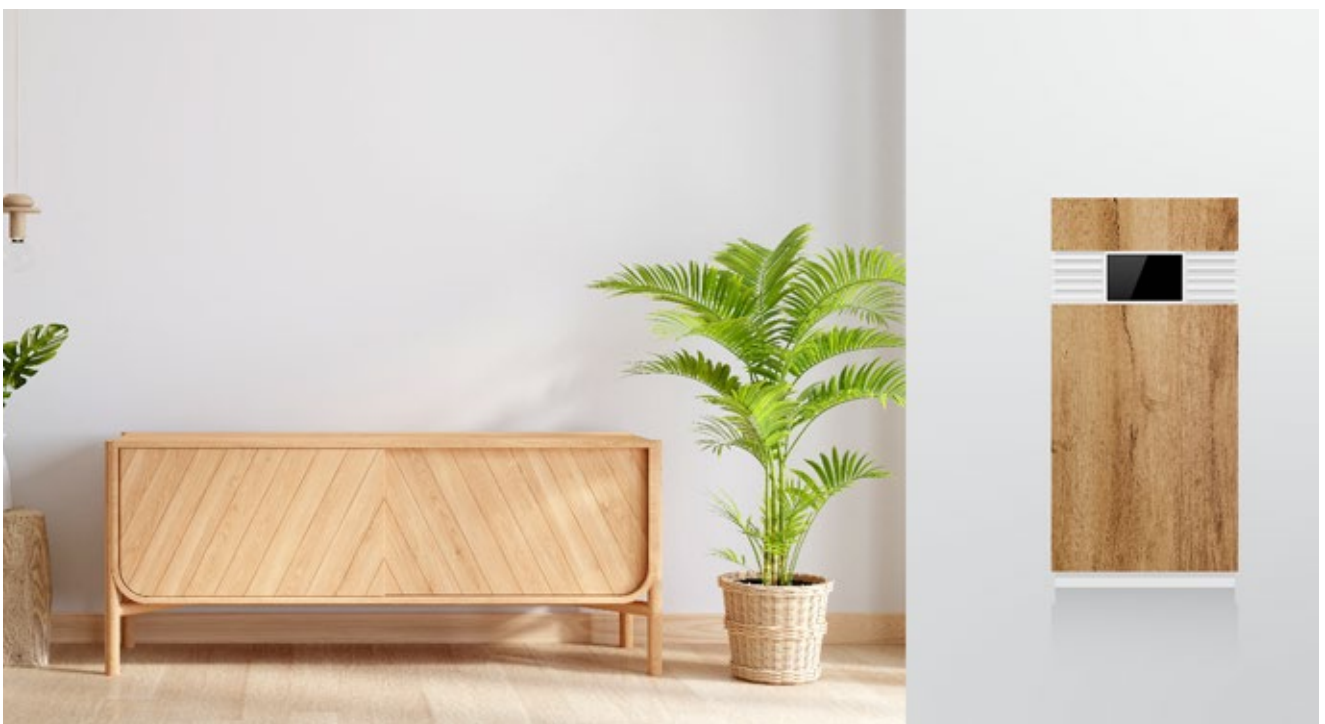



color



custom
ization



FÜR WEN IST CELLIT GEEIGNET?

IHT lässt sich präzise auf Ihre Leistungsfähigkeit anpassen und bietet Athleten eine perfekte Ergänzung zu ihrem Training. Zudem ist es eine entspannende Erfahrung – viele Nutzer schlafen während der Sitzung ein. Dank CELLIT können Sie die Vorteile der Höhenluft genießen, ohne das Haus zu verlassen, und zusätzlich von der Flexibilität des Trainingsgeräts profitieren.



ATHLET, BERGSTEIGER & BIOHACKER

CELLIT Expert ist für Benutzer gedacht, die Erfahrung im IHT haben und eine entsprechende Konstitution besitzen. Es ermöglicht eine Sauerstoffreduktion im Atemgasgemisch auf bis zu 9% und eine Sicherheitsabschaltgrenze von bis zu 73%. Das spezielle Modell eignet sich sowohl zur Vorbereitung auf sportliche Veranstaltungen als auch zur Regeneration nach dem Training oder nach Verletzungen.

Veranstaltungen als auch zur Regeneration nach dem Training oder nach Verletzungen.

IHT FÜR ZUHAUSE

Mit CELLIT können gesunde Nutzer jederzeit in der Komfort ihres Umfelds ein IHT durchführen. Die sechs Benutzerspeicherplätze ermöglichen ein regelmäßiges Training für mehrere Familienmitglieder, Verwandte und Freunde.

FÜR HOTELS, SPAS & STUDIOS

CELLIT eignet sich auch als IHT-Gerät für den gewerblichen Einsatz. Die empfohlene Trainingszeit von 40 Minuten macht CELLIT sowohl für Einrichtungen mit festem Kundenstamm, wie Fitnessstudios, als auch für wechselnde Gäste, wie in einem Wellnesshotel, interessant. Nach nur einer Trainingseinheit fühlen sich die meisten Nutzer entspannt und erfrischt.

IHT-VORTEILE AUF EINEN BLICK

Die Reduzierung des Sauerstoffgehalts kann präzise auf die körperliche Leistungsfähigkeit eingestellt werden.

Die meisten Nutzer empfinden IHT als sehr entspannend und schlafen während der Sitzung kurz ein.

Athleten können IHT problemlos mit ihrem Kraft- und Ausdauertraining kombinieren.

Im Bereich des Körpers ist der Unterschied zwischen Bergluft und sauerstoffreduzierter Luft aus einem Hypoxiegerät nicht unterscheidbar.

Während Sie die malerische Bergkulisse vermissen mögen, bietet ein Hypoxiegerät wie CELLIT zusätzliche Vorteile, die über das Bergerlebnis hinausgehen.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hypoxie	10% - 16% O ₂ (CELLIT Expert 9% - 16%)
Normoxie	21%
Hyperoxie	>32%
Trainingsdauer	max. 90 Minuten
Überwachung	Pulse, SpO ₂ , O ₂
SpO ₂ Messbereich	1 - 100%
Herzfrequenzmessbereich	25 - 240 Schläge pro Minute
Sicherheitsabschaltung	78% (cellit Expert 73%)

ABMESSUNGEN

Gewicht	ca. 40kg
Abmessungen	W 350 x D 350 x H 735mm
Bildschirm	Touchscreen 7"/ 17,8cm Auflösung 600 x 800 pixel



